

신체장애자용 손잡이 시공/사용 설명서

올바른 시공과 제품의 기능을 잘 살릴 수 있도록 이 설명서의 내용을 꼭 읽으신 후 시공하여 주십시오.

＊ 시공시 주의사항

신체장애자는 몸의 균형을 스스로유지하지 못하고 전체중을 손잡이에 의지하여 기구를 사용하므로 손잡이의 고정방법은 대단히 중요하며 충분히 고려하여 시공되어야 합니다.온몸을 손잡이에 의존하여도 안전하게 견고성을 유지할 수 있도록 시공하기 위해서는 신체장애자 설비를 고정하는 벽부분은 반드시 붉은 벽돌이나 콘크리트 벽으로 시공되어야 합니다.시멘트 벽돌이나 시멘트 블록은 고정이 불완전하므로 절대 사용해서는 안됩니다.

＊손잡이 설명

(1)대변기용 고정식 손잡이

대변기손잡이는 휠체어,지팡이 사용자등 다양한 접촉에 대응할 수 있게 되어있습니다. 손잡이 좌우간격은 휠체어가 들어가는 데 필요한 750mm정도 .부착높이는 휠체어팔걸이대와 같은 높이인 700mm가 표준치수입니다.

(2)가동식 손잡이는 휠체어뿐만 아니라 중증 장애에 따른 휠체어 사용자에게 용이합니다.

(3)소변기용 손잡이

몸을 안정시키기 위해서 가슴부나 옆구리부가 걸쳐 기대어지기 쉬운 형상으로 되어있습니다.가슴에 닿아 몸을 지탱하는 손잡이 높이가 사용상 중요합니다. 성인의 경우 가슴부위 표준 높이는 1180mm입니다.


(4)세면기용 손잡이

세면기 이용시에 몸을 안정시키기 위한 손잡이는 지팡이 사용자의 경우와 휠체어 사용자의 경우가 각각 다르겠으나 두 경우에도 두루 적합한 형태의 것으로 되었습니다.

(5)욕실용 . 다용도 손잡이

욕조출입을 용이하게 하고 욕조안에서 활동을 편하게 하기 위해서 손잡이가 필요합니다. 또 탈의실,샤워장에도 잡고 걸기용 손잡이를 설치합니다. 손잡이 부착 위치,높이 등은 사정,부위등을 충분히 고려하여 결정합니다.

＊ 시공 방법

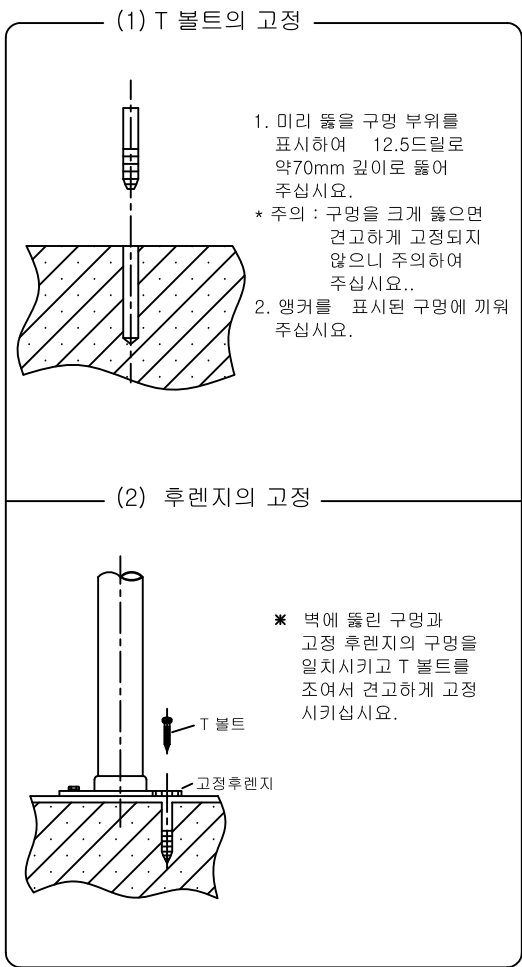

＊사용상 관리

사용도중 매주 1회씩 비누를 묻혀 부드러운 수세미로 세척하여 주시면 광택을 오래 유지할 수 있습니다. 산성세제로 손잡이를 닦지 마십시오.

시공 완성도

[품번]

1.다용도용 손잡이(우타입)	[-01]	5.세면기용 손잡이(일체형)[	-05]
2.다용도용 손잡이(좌타입)	[-02]	6.소변기용 손잡이	[-06]
3.대변기용 고정식 손잡이	[-03]	7.대변기용 가동식 손잡이	[-07]
4.세면기용 손잡이(분리형)	[-04]	8.대변기용 가동식 손잡이	[-08]

다용도용 손잡이(우타입)	다용도용 손잡이(좌타입)	대변기용 고정식 손잡이
세면기용 손잡이(분리형)		세면기용 손잡이(일체형)
소변기용 손잡이	대변기용 가동식 손잡이(상하 이동식)	대변기용 장애인 가동식손잡이(좌우 이동식)